

药品稳定性试验箱 Stability Chamber

基本信息

药品稳定性试验箱	中文名
Stability Chamber	英文名
150L-3000L	规格
ZL 202022621384.2	专利

技术规格

10~65°C	温度范围
±0.5°C	温度波动度
±1.0°C	温度偏差
15~95%RH	湿度范围
±2.0%RH	湿度波动度
±3.0%RH	湿度偏差

公共要求

220V 50Hz/60Hz	电源
纯化水 电阻率≥0.5 MΩ.cm	水源
5~35°C	环境
符合ICHQ1A,CP2025 以及国家标准	标准
通过网口连接	网络

技术服务

CCA DQ	3Q 验证
IQ/OQ	
PQ	

硬件配置

压缩机	进口变频压缩机	节能 > 50%
蒸发器	镀膜工艺	防腐能力倍增
加湿器	PTC加热体	自动防护功能
控制器	程序触摸屏	7寸彩色
	三级权限	可分配更多级
	审计追踪	存储操作记录
	变频特性	显示变频输出量
	提示功能	定期维护提示
湿度传感器	高精度电容式	原装进口
水路系统	自动水循环	带水位刻度
报警系统	现场声光报警	远程信息报警
结构材质	内部为不锈钢304	聚氨酯发泡保温
双层门	内门为钢化玻璃	带门加热, 防冷凝水
安全防护	五重防护	含独立超温保护


软件配置

数据存储	自带存储硬盘, USB导出	5年以上
数据打印	针式微型打印机	长期保存
数据软件	多台设备局域连接	软著登字第12559111号
数据网络版	服务器版本功能	符合FDA 21CFR Part 11

技术优势

性能	出色的均匀性, 使得设备多年使用后, 也能在满载状态下符合 ICH 稳定性测试的要求
可靠	除了有更好波动度和均匀度, 超17年的实际应用考验
智能	除了更稳定的控制, 还增加了更多的维护保养提醒
效益	应用先进的变频制冷技术, 能耗比上一代降低 > 50%
安全	五重防护, 包含关键性的漏电保护

药品稳定性试验箱 GS-FC系列 (规格型号)

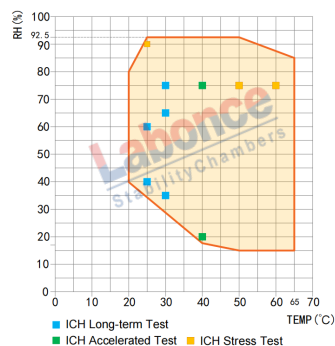

◆ 温湿度控制范围图



◆ 150L~500L



◆ 800L~3000L

型号	控温范围 (℃)	控湿范围 (RH)	容积 (L)	内胆尺寸 (mm) W×D×H	外形尺寸 (mm) W×D×H	功率 (KW)	搁板 (标配)	备注
Labonice-150GS-FC	10 ~ 65	15 ~ 95%	150	600×405×625	780×830×1480	1.5	3/6	单开门
Labonice-250GS-FC	10 ~ 65	15 ~ 95%	250	600×500×830	780×880×1650	1.8	3/7	
Labonice-400GS-FC	10 ~ 65	15 ~ 95%	400	600×700×950	780×1060×1750	2.0	3/10	
Labonice-500GS-FC	10 ~ 65	15 ~ 95%	500	680×680×1080	860×1050×1850	2.2	4/11	
Labonice-800GS-FC	10 ~ 65	15 ~ 95%	800	1200×490×1360	1385×895×1965	2.5	4/8	双开门
Labonice-1000GS-FC	10 ~ 65	15 ~ 95%	1000	1400×510×1400	1615×925×1975	3.0	4/8	
Labonice-1500GS-FC	10 ~ 65	15 ~ 95%	1500	1500×710×1400	1710×1180×1990	3.2	4/8	
Labonice-2000GS-FC	10 ~ 65	15 ~ 95%	2000	1500×970×1400	1710×1380×1990	3.5	4/8	
Labonice-3000GS-FC	10 ~ 65	15 ~ 95%	3000	1600×1100×1680	1810×1470×2270	3.8	4/8	

本彩页上的所有指标是在环境温度 20~25℃下测得。